

2019 年 6 月 27 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 J M C
代 表 者 名 代表取締役社長 渡 邊 大 知
兼 C E O
(コード番号：5704 東証マザーズ)
問 合 せ 先 経 営 企 画 室 岸 川 智 則
シニアマネージャー
(TEL. 045-477-5751)

医療機器「OPENCAST」（ギプス包帯）の 日本における独占販売権取得及び薬事取得のお知らせ

株式会社 JMC（神奈川県横浜市 代表取締役社長兼 CEO：渡邊大知）は、この度 openM inc.（大韓民国 大田市 CEO：JONGCHIL PARK）が製造する医療機器「OPENCAST」（ギプス包帯）に関する日本国内における独占販売権を取得し、併せて「OPENCAST」の薬事を取得いたしましたのでお知らせいたします。

「OPENCAST」（医療機器届出番号：14B1X10020000002）は、骨折、疾患のある関節または疼痛のある捻挫等患部を固定するためのギプス包帯です。従来品に比べて、①皮膚の観察が十分に行える ②傷のある患部の処置が行いやすい ③患部の異常を早期発見しやすい 等のクリニカルベネフィットを備え、さらに、④通気性が良い ⑤臭いにくい ⑥痒い所が搔ける ⑦医師の許可があれば洗える 等の患者様の快適性や生活の質（QOL）の向上が図れるメリットを備えている製品です。

なお、本製品は 2019 年 6 月 28 日（金）～6 月 29 日（土）に福岡県で開催される「第 45 回日本骨折治療学会」（テーマ：美と機能）において、国内で初めて展示・公開いたします。

当社は今後も、このようなユニークな製品の販売及び開発を進め、日本の医療の質の向上に寄与できるよう取り組んでまいります。

販売名	オープンキャスト（製品名：OPENCAST）	
医療機器届出番号	14B1X10020000002	
製品写真 左：上肢 右：下肢		
製造元	openM inc.（オープン エム インク：大韓民国 大田市）	
販売開始時期	2019 年 8 月上旬を予定	

【契約先概要】

会 社 名 : openM inc.
所 在 地 : 413, Expo-ro, Yuseong-gu, Daejeon, Korea
代 表 者 : JONGCHIL PARK
設 立 : 2007 年 6 月 18 日
事業内容 : 医療機器製造等
U R L : <http://www.openm.com/>

【当社概要】

1999 年、光造形方式の 3D プリンターを導入して製造業に参入。3D プリンター出力による部品製造の事業規模が拡大する中、2006 年に有限会社エス・ケー・イーを吸収合併し、砂型鋳造法による鋳造事業をスタート。3D プリンターで培ったデジタル技術を背景に、職人の肌感で語られることが多かった鋳造を定量化することで、経験年数に依存せずに質の高い鋳造ができることを証明。業界に新たな進化を起こした。2015 年には産業用 CT による非破壊検査・測定を目的とした CT 事業を開始。さらに、心臓カテーテルシミュレーター『HEARTROID』の販売でメディカル分野にも領域を拡げた。2016 年東京証券取引所マザーズに上場。2017 年 7 月、高度医療機器販売業・貸与業許可取得。2018 年 8 月、医療機器製造業登録、第 1 種医療機器製造販売業許可取得。

所 在 地 : 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-5-5 住友不動産新横浜ビル 1F
代 表 者 : 代表取締役社長兼 CEO 渡邊大知
設 立 : 1992 年 12 月 18 日
資 本 金 : 767,092,000 円
売 上 高 : 2,582 百万円 (2018 年 12 月期)
従業員数 : 119 名 (2018 年 12 月)
事業内容 : 3D プリンターおよび砂型鋳造による試作品、各種部品・商品の製造、販売
産業用 CT の販売および検査・測定サービス
高度管理医療機器等の販売、医療機器等の製造・製造販売
U R L : <https://www.jmc-rp.co.jp/>

◆本件に関するお問い合わせ先◆

株式会社 JMC 経営企画室 IR 担当
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 5 番 5 号
電話番号 : 045-477-5751 E-mail : ir@jmc-rp.co.jp

JMC

通気性

見える

見える

洗える

快適性

診える

痒いところに
手が届く




OPENCAS



OPENCAST


使用例

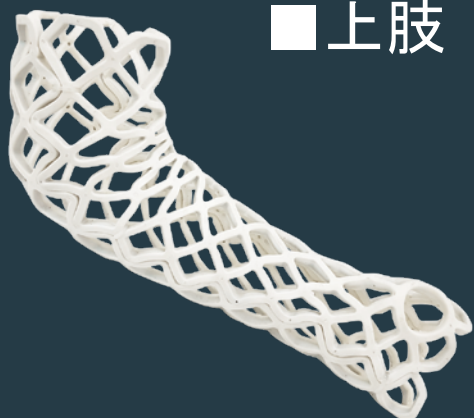

■ 上肢



■ 下肢

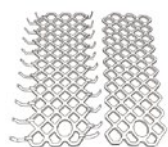

1.

製品の1枚のオープンキャストの両側にクランプを取り付けます。




2.

オーブン等でオープンキャストを加熱します。



3.

皮膚を保護するため、適当な幅と間隔でストッキネットを巻きます。

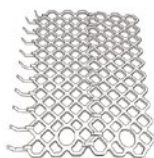

4.

加熱されたオープンキャストを取り出し、2枚のオープンキャストをクランプで結合します。



5.

患部に巻き付け、クランプで固定しながら形状を整えます。



6.

透明ラップなどを巻き付けオープンキャストが固まるのを待ちます。



7.

透明ラップを除去し、オープンキャストの隙間から、ストッキネットを除去します。




8.

ギプス完成

OPENCAST size

W x L (mm)	
CM-03	130 x 342
CM-04	147 x 391
CM-05	167 x 435
CM-06	183 x 479
CM-07	204 x 527
CM-08	228 x 582

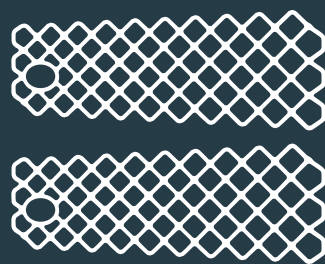

販売名: オープンキャスト

製品名: OPENCAST

ClassI 一般医療機器

一般的名称: ギプス包帯

医療機器届出番号: 14B1X10020000002

【製造販売元】

株式会社 JMC

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-5

TEL 045-273-3410

FAX 045-471-5270

MDM20190624-001T

【販売元】